

Avantgarde Teen 2 T / Teen 2 VR

Faltbarer Aktivrollstuhl für Kinder und Jugendliche



Art-Nr. 480F45=30000_K (Teen 2 T)
Art-Nr. 480F45=40000_K (Teen 2 VR)

Ob zu Hause, in der Schule oder auf Entdeckertour mit Freunden – mit dem Aktivrollstuhl Avantgarde Teen 2 ist das Kind jederzeit mobil und aktiv bei allen Unternehmungen dabei. Der Rollstuhl ist leicht zu fahren, wendig und faltbar. Der Avantgarde Teen 2 T hat einen festen Vorderrahmen mit integriertem Fussbrett, der Avantgarde Teen 2 VR hingegen hat abschwenkbare Beinstützen.

Im Grundmodell sind bei beiden Modellen einen geraden oder abduzierten Vorderrahmen enthalten.

Basismodell

- Aluminiumrahmen
- Sitztiefenanpassung bis 40 mm
- Verstellbare Seitenteile aus Aluminium
- Durchgehende oder geteilte Aluminiumbeinstütze
- Kniehebelbremse
- Anpassbare Rückenbespannung in 3 Farben
- Unterschiedliche Seitenteile
- Für KMP (BTW) Transport freigegeben (bis 75 kg)

Optional

- Transitrollen
- Stockhalter mit Ankipphilfe
- Adapter für kleine bzw. grosse vordere Sitzhöhe (-/+ 3,5 cm)
- Radstandsverlängerung
- Verschiedene höhenverstellbare Schiebegriffe
- Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleitperson
- Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen für 24" Felgen beim Avantgarde Teen 2 T
- Verschiedene Speichenschütze
- Rolli-Rucksack



• Vorradaufhängung



• Kniehebelbremse



Das Besondere

Der Avantgarde Teen 2 / Teen 2 VR mit Abduktionsrahmen beugt Folgeschäden durch optimale Becken- und Beinpositionierung vor. Der breite Fussraum bietet genügend Platz z.B. für Orthesenschuhe.

Die wegschwenk- und abnehmbaren Beinstützen des Avantgarde Teen 2 VR verringern den Abstand, erleichtern das Umsetzen in und aus dem Rollstuhl sowie die Pflege des Kindes.




Die Gebrauchsanweisung mit ausführlichen Informationen zum Produkt können Sie als PDF-Datei unter der E-Mail-Adresse suisse@ottobock.com anfordern.



Technische Daten	Avantgarde Teen 2 T	Avantgarde Teen 2 VR
Max. Benutzergewicht	90 kg	90 kg
Sitzbreite	220–360 mm	260–360 mm
Sitztiefe	240–400 mm	300–400 mm
Sitzhöhe vorn / hinten	420–510 / 350–510 mm	420–510 / 350–480 mm
Gesamtlänge ohne Radstandsverlängerung	680–885 mm	760–880 mm
Gesamtbreite	390–560 mm	390–560 mm
Faltmass ab	260 mm	260 mm
Rückenhöhe	175–400 mm	175–400 mm
Unterschenkelänge	160–470 mm	160–470 mm
Rückenwinkel	-9° bis +9°	-9° bis +9°
Gewicht ca.	12,5 kg	12,5 kg

Rahmenfarben

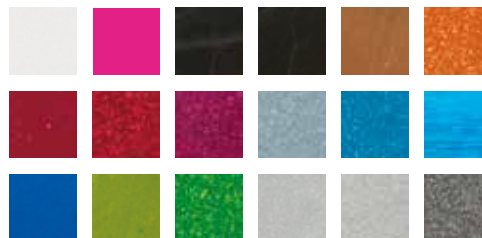

Polsterfarben

