

Kimba Reha-Kinderwagen

Sicher und bequem die Welt entdecken



NEU

Art.-Nr. 470G71=5_AB03_C (Kimba Sitzeinheit)
Art.-Nr. 470G71=5_AB02_C (Kimba Strassengestell)



• Kimba Sitzeinheit



• Kimba Strassengestell

Gemeinsam mit Anwendern, Therapeuten und Ärzten wurde der Kimba Buggy weiterentwickelt und optimiert. Im Fokus standen Sicherheit, Qualität, Individualität und Komfort. Der neue Kimba überzeugt mit einem luftigen Design, zusätzlichen Stauraum und diversen Optimierungen im täglichen Handling. Er bleibt der ideale Begleiter auf dem Weg zum Kindergarten, zum Supermarkt oder unterwegs im Auto.

Kernmerkmale

- 2 Grössen verfügbar
- Rahmenfarben: Schwarz oder Weiss
- Polsterfarbe: Grau
- Rahmen aus hochwertigem Aluminium
- Sitzkantelung bis 40°
- Höhenverstellbarer Schiebebügel mit Rastgelenk
- Vorderräder lenkbar
- EVA-Räder mit Feststellbremse
- Integrierte Gurthalteösen für den KMP-Transport
- Kimba Sitzaufnahme, auch für individuelle Sitzschalensysteme geeignet
- Grosszügige Stauraumfläche unter dem Sitz (auch als Plattform für Beatmungsgeräte nutzbar)
- Optimierte Federung der Hinterachse
- Automatische Fallverriegelung zum sicheren Verladen des Strassengestells

Optionen

- Polsterauflage in 4 verschiedenen Farben
- Reflektierende Farbakzente (Reflexionsgrad RA1)
- Stosschutz
- Buggyboard „Techno“
- Sitzschalenenträger
- Fussbankanlage für Sitzschalenenträger
- Schleifbremse
- Wickeltasche
- Ankipphilfe: links oder rechts
- Therapietisch
- Luftbereifung



Inlayfarben



Selbstreflektierende Aufkleber



Technische Daten	Grösse 1	Grösse 2
Gesamtbreite	595 mm	665 mm
Sitzbreite (min. / max.)	200–300 mm	260–350 mm
Sitztiefe mit Sitztiefenverkürzung ab 140 mm	190–310 mm	240–400 mm
Rückenlänge	410–610 mm	560–700 mm
Rückenwinkel	80° bis 180°	80° bis 180°
Sitzkantelung (min. / max.)	-40° bis +10° oder -10° bis +40°	-40° bis +10° oder -10° bis +40°
Unterschenkellänge (min. / max.)	190–310 mm	200–370 mm
Unterschenkellänge, verkürzt (optional) ab	120 mm	120 mm
Raddurchmesser vorn / hinten	170 / 280 mm	170 / 280 mm
Schiebegriff (min. / max.)	710–1.160 mm	710–1.160 mm
Faltmasse ohne Sitz (L x B x H)	790 x 595 x 460 mm	790 x 665 x 460 mm
Faltmasse min. mit Sitz in Fahrtrichtung (L x B x H)	900 x 595 x 530 mm	970 x 665 x 590 mm
Gewicht Strassgestell	10,5 kg	11,5 kg
Gewicht Sitzeinheit	7,5 kg	9,5 kg
Max. Zuladung Sitzeinheit*	40 kg	40 kg
Max. Zuladung Ablagekorb*	15 kg	15 kg
Max. Zuladung Strassgestell	55 kg	55 kg


*Das Gesamtgewicht von Benutzer und Zuladung im Ablagekorb darf 47,5 kg (Grösse 1) bzw. 45,5 kg (Grösse 2) nicht überschreiten.



- Problemlose und sichere Rückenwinkelverstellung durch Sicherheitspin.



- Neue Inlays – individuell und hygienisch.

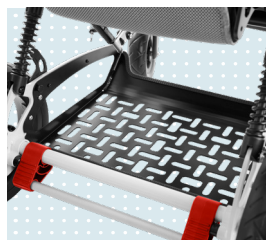

- Grosszügige Stauraumfläche unter dem Sitz. Auch als Plattform für Beatmungsgeräte nutzbar.



- Die Kantelauslösung befindet sich nah am Schiebebügel und ist dadurch sehr komfortabel zu bedienen.



- Leicht zusammenklappbar inkl. automatischer Fallverriegelung.



- Passend zu den Inlays gibt es zwei Varianten von selbstreflektierenden Aufklebern in je 3 Farben.