

Wingus


Zuverlässiges und komfortables Design



Der Wingus ist ein heckangetriebener Sit'n'Drive Elektrorollstuhl, welcher gleichermaßen für den Innen- und Aussenbereich geeignet ist. Dieses kompakte und wendige Modell verfügt über eine innovative selbstfedernde Rahmenkonstruktion, welche für hohen Fahrkomfort sorgt. Er kombiniert langzeitgeprüfte Funktionalität mit einem ansprechenden und minimalistischen Design: *Verlässlichkeit made in Germany.*

Kernmerkmale

- Hoher Fahrkomfort aufgrund innovativer selbstfedernder Rahmenkonstruktion
- Parallel wegschwenkbarer Bedienpulthalter
- Gel-Batterien 28,75 Ah (C5) / 35 Ah (C20)
- Einfacher Seitentransfer durch wegklappbare Armlehnen
- Kompakte Masse erlauben eine einfache Verwendung in engen Räumen
- Einfache Sitztiefenänderung und Unterschenkellängeneinstellung
- Sitzgurt für sicheren Halt
- Integrierter Kippschutz
- Beinstütze mit hochklappbarer, winkelverstellbarer Fussplatte
- Servicefreundlich durch pannensichere Räder
- Spritzschutz für Antriebsräder
- Leichtes Produktgewicht von 57 kg

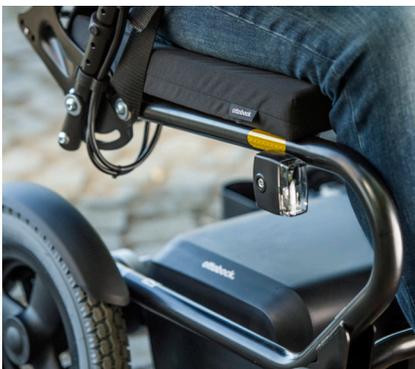

• Hoher Sitzkomfort durch freischwingende Rahmenkonstruktion



• Langzeitgetestete Batterien und Motoren



Wingus Art.-Nr. 490E163=00025

Optionen

- Elektrische Beleuchtung nach StVZO oder Fusswegebeleuchtung
- Aufbewahrungstasche unterhalb des Sitzbereiches
- Positionierungsgurte für Füße
- Stockhalter
- Halter für Getränke
- Tasche für Mobiltelefon
- Mit hochwertigen Sitzkissen und Kopfstützen aus dem Zubehörsortiment kombinierbar
- Adapter für Kopfstützen-Montageset



• Spritzschutz für Antriebsräder



• Parallel wegschwenkbarer Bedienpulhalter



• Positionierungsgurte für Füße



• Adapter für Kopfstützen-Montageset



• Elektrische Beleuchtung nach StVZO



• Praktische Aufbewahrungstasche unterhalb des Sitzbereiches

Technische Daten

Anwendungsklasse	B
Sitzbreite	400–460 mm
Sitztiefe	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 mm
Vordere Sitzhöhe	500 mm
Gesamtlänge	
mit hochgeklappter Fussplatte	893 mm
mit ausgeklappter Fussplatte	1.050 mm
Gesamtbreite	585 mm
Rückenhöhe	550 mm
Rückenwinkel	0° / 10° / 20°
Unterschenkel-länge mit 50 mm-Sitzkissen (min. / max.)	380–480 mm
Reichweite	25 km
Max. Hindernisüberwindung	50 mm
Nenn-Steigfähigkeit	7° (12 %)
Max. Zuladung	120 kg
Gewicht	57 kg



Die Gebrauchsanweisung mit ausführlichen Informationen zum Produkt können Sie als PDF-Datei unter der E-Mail-Adresse suisse@ottobock.com anfordern. Die PDF-Datei kann auch in vergrößerter Form dargestellt werden.